

智能颈椎按摩仪

智臻版（APP款）

每天按摩15分钟，随时，随地，随心



使用前请仔细阅读说明书

>>产品介绍

非常感谢您选择我们这款颈椎按摩仪，在使用前请您详细阅读本说明书，全面的了解这款颈椎按摩仪的正确使用方法。请妥善保管好说明书以备日后查阅。

注：本公司保留对产品 & 说明书改进的权利,如有改动恕不另行通知，产品外观以实物为准。本册经过认真核对，但不排除可能存在印刷错漏或内容上的误解，敬请谅解，本公司保留解释权。

>>充电注意事项

- 1. 使用手机电源适配器充电用DC5V_USB输出式充电器给本产品充电
- 2. 第一次充电要在4小时以上
- 3. 请不要使用输出电压高于6V的充电器给本产品充电
- 4. 请不要在阳光直射等高温，潮湿，多灰，振动大等地方进行充电

>>清洁和维护

- 1. 清洁保养本产品时，请将主机关机，使用湿纸巾清洁电极片，当特别脏时可用医用酒精(酒精浓度75%)进行擦拭消毒
- 2、保养时请用中性清洁剂及柔软布擦拭，不可使用带有腐蚀性的清洁剂，不得放入水中浸泡或漂洗。

⚠ 建议
1. 初次使用时或产品长时间搁置后电池电量损耗, 请按照使用说明书进行充电操作确保其工作正常后再使用。
2. 本产品建议一个用户使用, 交叉用户使用时, 请清洁产品上的电极片后再使用
3. 建议16周岁以上的人群使用。
4. 建议不要与其他医疗器材或者两台以上的产品一起使用，可能会引起身体不适
5. 建议不要再高温多湿的场所或者有水的场所中使用。
6. 建议不要在容易受到振动冲击的场所或者强电磁场所中使用。
7. 驾驶汽车时请勿使用，否则可能因刺激过大引起身体不适，导致事故。

>>禁用人群


恶性肿瘤患者，有出血倾向的患者，孕妇，产妇，急性化脓性炎症患者，心脏起搏器使用者，金属内置物患者，人体的心脏附近。

>>技术参数

产品名称：颈椎按摩仪
产品型号：F2+
产品重量：100G
充电电压：DC 5V
标称电压：DC 3.7V

额定功率：5W
工作定时：15分钟
产品尺寸：150*145*45MM
充电电流：500mA
执行标准：GB 4706.1-2005
GB 4706.10-2008

>>产品示意图

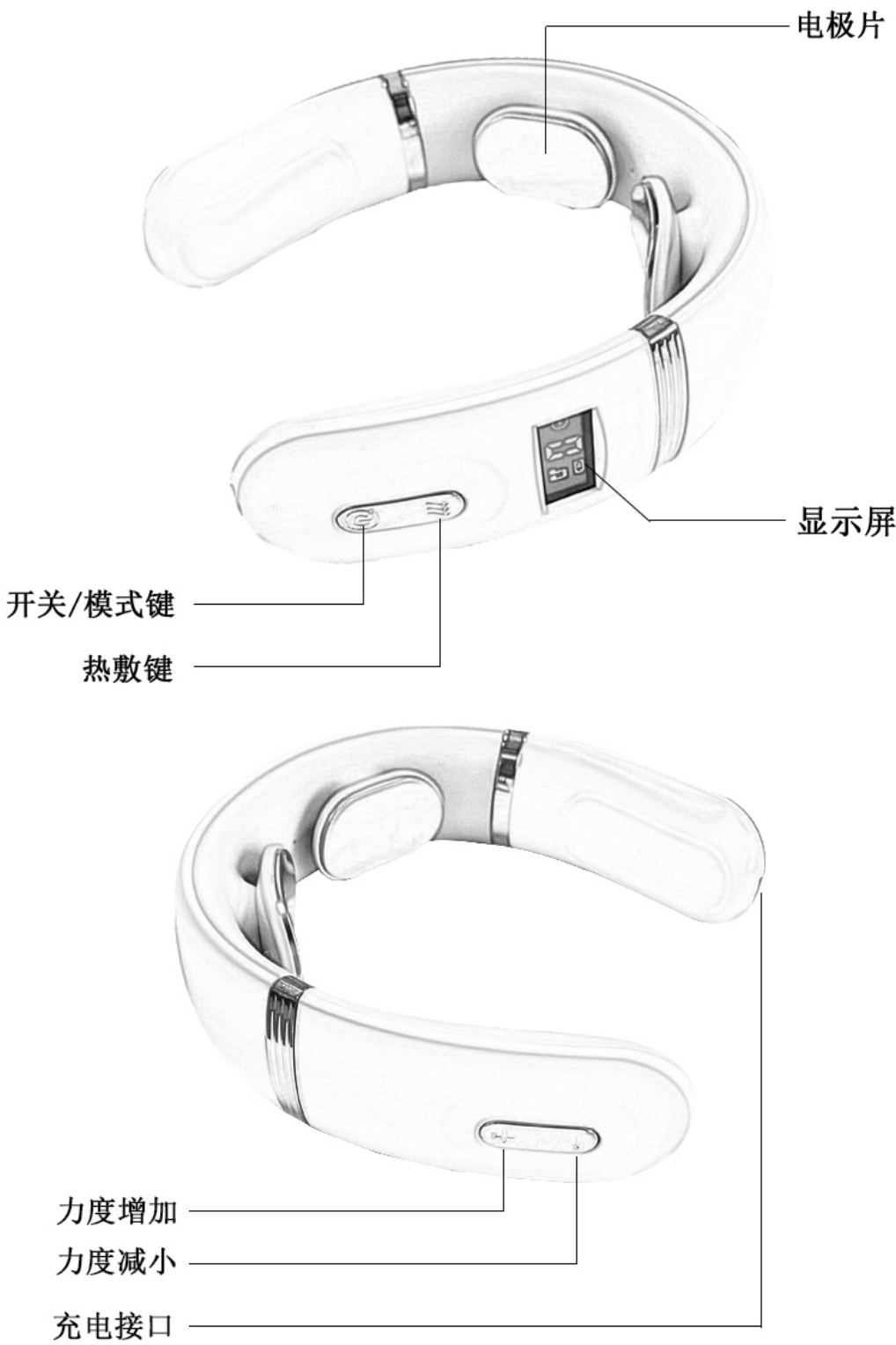

>>APP操作界面说明及二维码扫描下载地址



本产品已接入米家，可通过米家APP控制。

“已接入米家”（works with mijia）仅做软件层面的验证。小米不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监控等方面负责。

安装米家APP


扫描产品二维码，或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP；已安装米家APP的用户将被引导至设备连接页。



① 打开米家APP，并登录帐号；

② 点击APP首页右上角“+”，进入添加设备页面；

③ 点击添加设备页面右上角“”，扫描产品二维码后根据页面提示完成设备添加并使用。

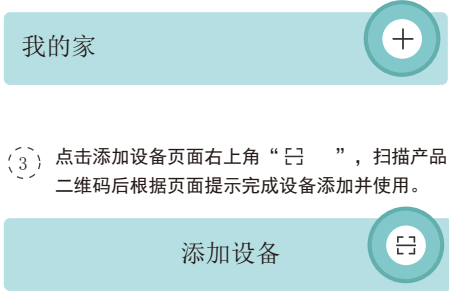

提示：产品二维码无法扫描时，可通过搜索产品名称，完成设备添加。

此外，由于米家APP不断升级更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

>>产品使用方法

1. 使用前：将颈椎部位的皮肤表面湿润，将产品佩戴好在脖子上，使电极片紧贴颈椎部位皮肤，调整好产品位置；
2. 开/关机：短按电源键，开机指示灯亮；长按电源键，产品关机；
3. 模式切换:短按电源键进行模式切换，按一下从模式1切换模式2再按一下从模式2切换模式3，依此类推，到最后模式就切换第一个模式。（产品分为9个模式，模式1为自动模式-->模式2为针灸模式--> 模式3为锤击模式--> 模式4为揉捏模式-->模式5为拍打模式-->模式6为推拿模式--> 模式7为舒缓模式-->模式8为指压模式-->模式9为混合模式）；
4. 混合模式有物理振动按摩和低频脉冲按摩；
5. 热敷模式：短按热敷键，按一下关闭热敷，再按一下开启热敷，再按一下又关闭热敷；
6. 增加按摩力度:短按“+”号键，增加按摩力度，按一下增加一档按摩力度产品共有19档力度可调；
7. 减小按摩力度：短按“-”号键，降低按摩力度，按一下降低一档按摩力度，产品最低力度为1档，当调整到0档时就没有按摩力度了；
8. 语音播报：按下电源键后同时按下热敷键进行语音播报切换。操作一次关闭语音，操作一次开启语音；
9. 当进行模式切换时，按摩力度默认0档. 请在模式切换后按“+”号键增加按摩力度；
10. 产品开机后会自动播放轻音乐，操作按键时，音乐暂停；没操作按键又会播放轻音乐，根据音量设置可将音量减小或关闭音乐。

>>注意

1. 如果使用本产品感到身体不适时，请立即停止使用
2. 身体或皮肤如有异样感觉，请立即停止使用
3. 请勿带着电子器械进行按摩，否则可能使电子器械误操作（如：电子手表时刻紊乱）
4. 发生不能运转的异常情况时，请立即关闭电源并取下，否则可能会导致高温或短路，发生事故，同时联系客服咨询
5. 请勿用湿手插拔USB充电线，否则可能导致触电危险发生事故
6. 请勿给儿童或者无表达意识能力的人使用，否则容易引发身体不适或发生事故
7. 请勿在浴室等温度高的地方使用或者边洗澡边使用产品，否则可能受到强烈电击，并损坏产品
8. 请勿在睡觉时使用，否则有可能使本体产生故障电极片可能被移动到其他部位导致身体不适
9. 请勿在驾驶汽车时使用，可能因刺激过大引起身体不适，导致事故
10. 请勿将电极片长时间贴于皮肤上，可能引起皮肤炎症
11. 在按摩时请勿使用皮带，项链等金属物接触电极片，否则可能受到强烈电击
12. 请勿在同一部位长时间（30分钟以上）使用，可能使按摩部位疲劳引起不适
13. 请正确佩戴本产品，用于颈椎部位，左右对称佩戴，否则可能会发生事故或引起身体不适
14. 从产品上拔下USB充电线时请勿拉拽导线，应该握住导线插头拔出，否则可能导致触电或损坏产品
15. 产品电极片具有表面发热功能,对热不敏感或过热体质用户使用前请咨询医生
16. 产品长时间工作时，电极片表面会发热，这属于正常现象
17. 建议请确认主机按钮正常工作后方可使用
18. 初次使用时，或产品长时间搁置后电池电量损耗，请按照使用说明书进行充电操作,确保其能正常工作
19. 废弃本产品时，请依照城市有关环保规定进行处理，可能会造成环境污染

>>建议

1. 未成年人禁止使用
2. 请勿在以下场所使用，存放本产品：阳光直射的场所，高温多湿的场所，有水的场所，灰尘较多场所
3. 建议每天使用2-3个循环（每个循环15分钟）建议不要连续多次使用

>>危险（请绝对不要与以下的医疗器械一起使用）

1. 心脏起搏器等体内植入型医用电子器械
 2. 人工心肺等维持生命医用电子器械
 3. 心电图仪等医用电子器械
- 会造成这些医用电子器械产生误动作，可能会危及生命

>>警告

1. 如果患者在身上同时使用高频手术设备和本产品时，产品电极片部位可能引起烧伤，也可能损坏产品
2. 如果在短波或微波治疗设备附近（1米内）使用本产品时,产品的输出可能不稳定
3. 按摩中电极片应避免伤口及伤疤
4. 按摩时，电极片不可置于胸部心脏附近，否则会增加心脏纤颤的危险
5. 产品建议一个用户使用
6. 交叉用户使用时，请清洁产品上的电极片后使用，使用产品时应将电极片紧密的贴合在皮肤上，均匀接触
7. 本产品电极片具有发热功能，同一部位长时间（超过15分钟）使用热敷功能时可能导致低温烫伤
8. 使用中或使用后出现身体不适，请立即停止使用，并咨询医生
9. 本产品内含锂电池，请勿自行拆卸，改装，水浸产品或投掷火中，否则可能导致产品损坏爆炸

下列情形，请咨询医生咨询后使用，否则可能会发生事故或引起身体不适

1. 正在接受医生治疗，并感觉身体异常的患者
2. 心脏，脑神经异常的患者
3. 体温超过38度（发热期）的患者
4. 感染性疾病的患者
5. 皮肤知觉障碍或皮肤异常的患者
- 6.正在服用药物的患者

- 7. 血压异常的患者
- 8. 不能自由表达自己意愿的患者
- 9. 由于糖尿病等造成高度末梢神经循环障碍而产生知觉障碍的患者
- 10.皮肤对不锈钢电极片过敏的患者

>>提示

- 1. 请勿与其他医疗器械或两台以上本产品一起使用，否则可能引起恶心或身体不适
- 2. 请勿用于使用说明书中所记载的按摩以外的目的，否则可能会发生事故，产生故障
- 3. 请勿使用表面有缺口，损坏的电极片，否则可能会发生事故，产生故障
- 4.请勿擅自拆卸，修理和改造本产品，否则可能导致故障或触电事故

>>产品性能故障表

状 况	可能原因及处理方式
无法启动	内部充电电池电量不足，及时充电，
	请确认主机产品开关键是否按下
不能充电或无充电显示	请检查USB和主机及适配器是否连接好
显示正常但无感觉	电极片是否直接接触皮肤？调整位置使其紧贴皮肤
	电极片和皮肤之间是否有头发衣物饰品等物品？移开物品
	力度档位是否为1档？调节增加按摩力度
有刺痛感	电极片与皮肤是否贴紧，需调整位置使其紧贴皮肤
	按摩时间是否太长？建议一次按15分钟，一天两次
	按摩力度是否过大？可调小力度
	皮肤是否对电极片过敏？严重过敏者需先进行脱敏治疗
	气候寒冷，皮肤干燥？用湿毛巾湿润皮肤使用
	皮肤表面是否有伤口？不可将电极片放于伤口进行按摩
刺激很弱	按摩仪电极片与颈部皮肤是否紧贴？需调整位置使其紧贴皮肤并调整适当力度
	电极片是否有污垢或油渍？清洁电极表面
	电池电量是否不足？若电量不足请充电
	按摩档位力度偏小？调节增加按摩力度

若有故障情况非上述情况时, 请立即拔掉插头并与本公司售后联系，切勿自行拆卸维修或更换零件

>>售后服务

产品自出售之日起，无论性能是否发生故障，您都可在三天内凭产品保修卡或发票（收据）到原购买柜台/网上销售平台办理退货. 退货时必须保证本产品未受人为外力损坏，外包装、说明书等附件完好无损坏
产品自售出之日起一年内，性能发生故障，您可以享受免费维修服务
维修时请出示本公司产品的保修卡（本公司所承诺的免费维修只包含工时费以及材料费，不包含运输费，同时本公司不提供上门维修服务）。本公司愿意承担产品废弃后的回收、处理、再利用的相关责任。

以下情况不属三包范围，但提供维修服务：
（需收取维修费用以及配件费用）

- 1. 客户因使用、保管、维修不当造成损坏的；
- 2. 非承担三包修理者拆动造成损坏的；
- 3. 因不可抗力因素造成损坏的；
- 4. 无本公司产品保修卡；

>>合格证

产品名称		规格型号	
生产日期		检 验 员	
生产厂家	oc pass 检验员		

>>保修卡

客户姓名		联系电话	
购买型号		购买日期	
客户地址			
故障描述			
购买渠道		订单编号	
接待客服		经 销 商	